


CONTACT ARTIKULATOR

Gebrauchsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni d'uso

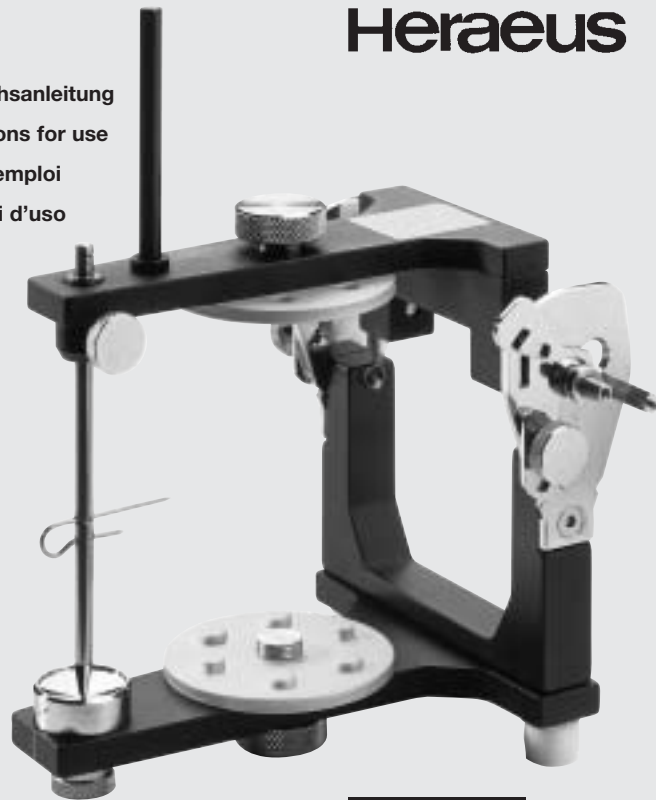

Heraeus

**Heraeus
Kulzer**

Partnership-First.

Das Contact System

■ Die Anfertigung eines funktionell einwandfreien Zahnersatzes setzt patientenanaloge Bewegungsabläufe im Artikulator voraus. Je nach Art des anzufertigenden Zahnersatzes genügen Mittelwertartikulatoren mit speziellen Qualitätsmerkmalen hier den Anforderungen.

■ Der Heraeus Kulzer Artikulator entspricht diesen Anforderungen. Zum Contact System gehören Registrierschablonen für die intra-orale Stützstiftregistrierung. Sie

orientieren sich an anatomischen und physiologischen Gegebenheiten und bieten in optimaler Weise die Voraussetzung für eine reproduzierbare Registrierung und Übertragung der entsprechenden Funktionen des natürlichen Kauorgans.

■ Zahlreiches Zubehör rundet das Heraeus Kulzer Contact Artikulator-Aufstellsystem ab.

■ Für die Aufnahme aller arbiträren Gesichtsbögen werden die den Artikulatoren beiliegenden Arbiträrstifte in die vorgesehene Bohrung an den Gelenkhaltern befestigt.

■ Split Cast System auf Anfrage.



Contact - Ein Artikulator mit speziellen Qualitätsmerkmalen.

Mittelwertartikulator

Unser Mittelwertartikulator Contact hat folgende Eigenschaften:

Kondylenbahnneigung 30° bezogen auf die Okklusionsebene. Die Schenkellänge vom Artikulatorgelenk zur Inzisalnadel beträgt 105 mm, entsprechend dem Bonwillschen Dreieck. Der Winkel am Inzisalteller hat eine 15° Einstellung. Bei Bedarf ist ein 0° Inzisalteller als Zubehör erhältlich. Die Arbeitshöhe zum Einartikulieren beträgt 100 mm.

Die Kondylargelenke sind doppelt konisch geformt und entsprechen damit der Kondylartechnik nach Prof. Gerber. Der innere Konus mit 17° und der äußere Konus mit 12° führen die Bennettbewegung aus.

Position A

- Arretierung unten -

Für die Modellmontage und für alle aus der Zentrallage durchzuführenden Öffnungs- und Schließbewegungen (Okklusionskontrollen). Für die Bestimmung der zentralen Okklusionsebene befindet sich eine Nullmarkierung am Inzisalstift.

Position B

- Arretierung oben -




Für die gelenkkonforme Wiedergabe der Vorgeit-, Diagonal- und Seitwärtsbewegungen nach rechts und links (Protrusion und Laterotrusion).

Position C

- Arretierung mitte vorn -


Für die Kontrolle von Rückwärtsbewegungen (Retrusion).

Mit Hilfe der Gelenkarretierung sind folgende Bewegungen ausführbar:

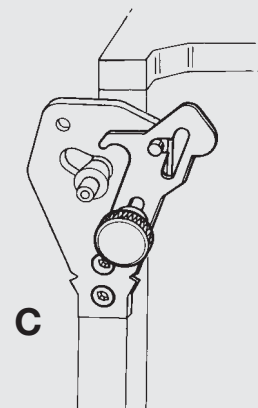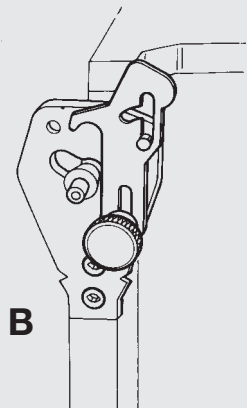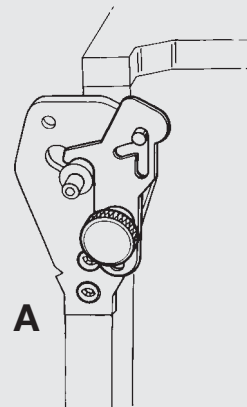

Zubehör

- 1 Adapter für:
 - Aufstellkalotte
 - Aufstelltisch
 - Einrichtschlüssel
- 2 Aufstellkalotte
- 3 Aufstelltisch
- 4 Einrichtschlüssel mit verschiebbarer Platte und Symphysenanzeiger
- 5 Abstützstift
- 6 Distanzhalter kurz
- 7 Distanzhalter lang
- 8 Eingipshilfsplatten (2 Stück)
- 9 Inzisanzeiger
- 10 Inzisstift gerade
- 11 Inzisteller 0°, 15°
- 12 Sockelplatten (2 Stück)
- 13 Umbausatz für Erhöhungen mit geradem Inzisstift groß
- 14 Split Cast System auf Anfrage

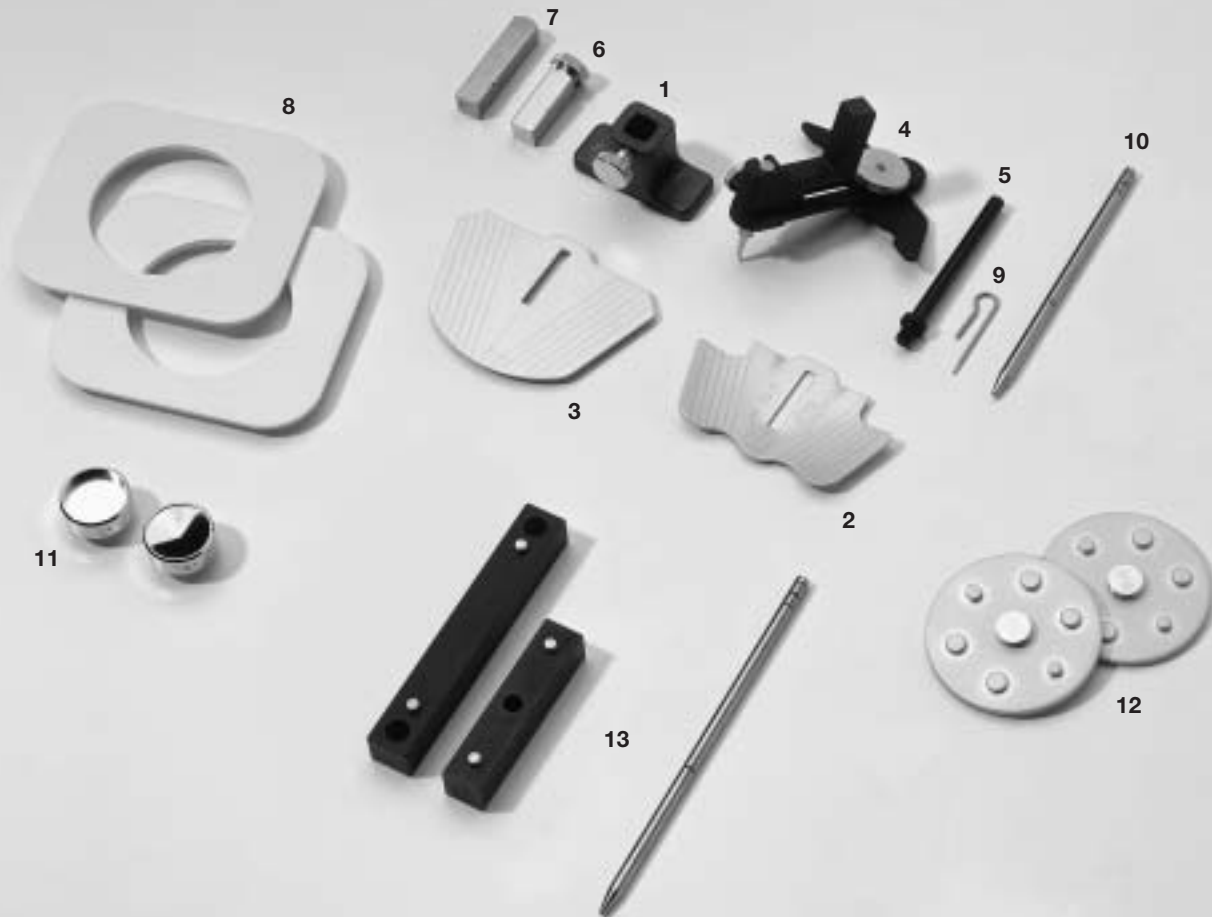


Teileliste

- 01 Artikulatoroberteil
- 02 Rahmenteil oben
- 03 Gelenk
- 04 Gelenkhalterung links mit Bohrung für Arbiträrstifte
- 05 Halteschraube Gelenk
- 06 Befestigungsschraube oberes Rahmenteil
- 07 Rahmenteil unten
- 08 Sockelplatte
- 09 Hilfsplatte zum Eingipsen
- 10 Artikulatorunterteil
- 11 Unterlegscheibe
- 12 Befestigungsschraube Rahmenteil unten
- 13 Fußkappe
- 14 Feststellschraube für Sockelplatte
- 15 Stütztift für Artikulatoroberteil


- 16 Feststellschraube für Inzisalstift
- 17 Gelenkhalterung rechts mit Bohrung für Arbiträrstifte
- 18 Befestigungsschrauben für Gelenkhalterung
- 19 Zugfeder
- 20 Gelenkarretierung
- 21 Unterlegscheibe
- 22 Feststellschraube für Gelenkarretierung
- 23 Inzisalstift
- 24 Inzisalzeiger
- 25 Sicherungsring
- 26 Inzisalteller
- 27 Feststellschraube für Inzisalteller

Bei Defekt oder Verlust einzelner Artikulatorteile bestellen Sie diese bitte anhand der abgebildeten Liste unter Angabe der jeweiligen Nummer.

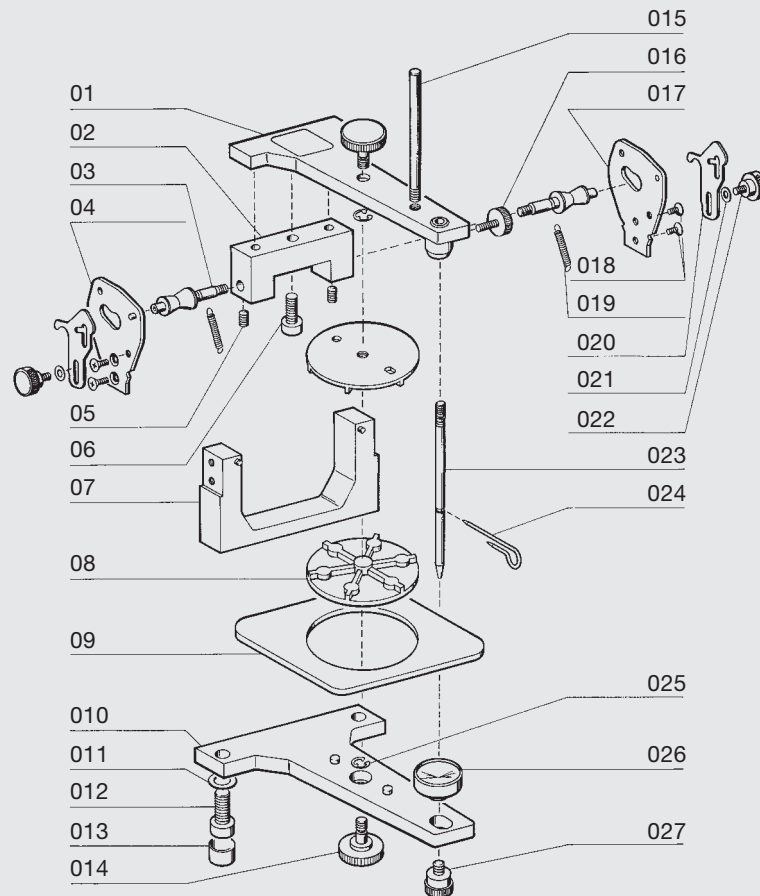

Zubehör-Teileliste

- 028 Feststellschraube für Adapter
- 029 Adapter
- 030 Symphysenanzeiger mit Feststellschraube
- 031 Feststellschraube für Auflageplatte
- 032 Einrichtschlüssel
- 033 Auflageplatte für Einrichtschlüssel
- 034 Konterschraube für Auflageplatte
- 035 Aufstellkalotte
- 036 Feststellschraube für Kalotte und Aufstelltisch
- 037 Aufstelltisch
- 038 Distanzhalter für Adapter

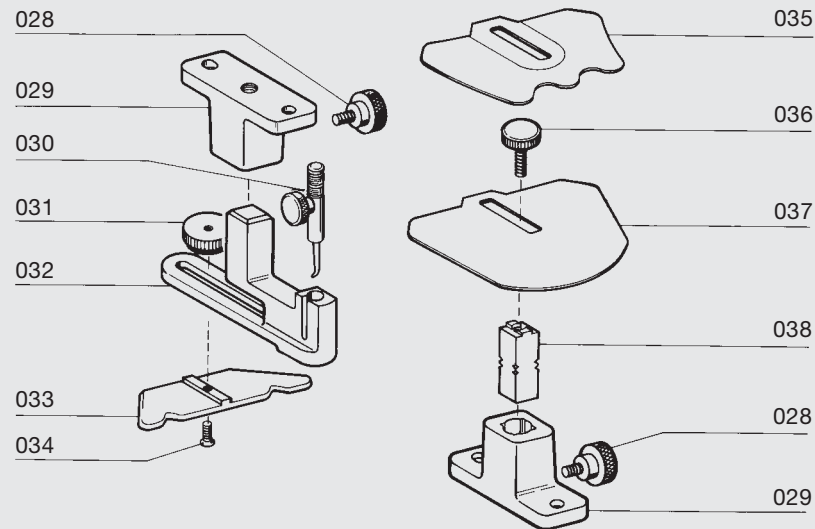

The Contact System



■ The production of prosthetic work that will function correctly and satisfy the patient requires the use of an articulator that carries out the same physiological movements as the patient. For the majority of prosthetic work a semi-adjustable articulator with a number of additional features is completely adequate.

■ The Heraeus Kulzer articulator meets these demands. The Contact System includes registration blocks for intraoral pin

registration methods. These are positioned according to the anatomical and physiological factors and offer the best possible conditions for a reproducible registration and transfer of the corresponding functions of the natural mastication.

■ A wide range of accessories is available for the Heraeus Kulzer Contact Articulator System.

■ To fit all arbitrary face bows, the arbitrary pins supplied are inserted into the corresponding openings in the articulator joints.

■ A split cast system is available as an accessory.

Contact - An Articulator with special quality characteristics.

Semi-adjustable articulator

Our Contact semi-adjustable articulator provides the following adjustments:

Condylar path of 30° relative to the occlusal plane. The distance from the articulator joints to the incisal pin is 105 mm, according to the Bonwill triangle. The inclination of the incisal plate is 15°. If required, an incisal plate with 0° is available, as an accessory. The space available for mounting models is 100 mm.

The condylar joints have a double cone shape and correspond to Prof. Gerber's requirements. The inside cone, with an angle of 17°, and the outside cone, with an angle of 12°, execute the Bennett movement.

Position A

- Stop plate down -

For mounting models and for all opening and closing movements from centric (check of occlusion).

The zero mark on the incisal pin is used to indicate the central occlusal plane.

Position B

- Stop plate up -


For the joint-like reproduction of protrusive and laterotrusive movements.

Position C


- Stop plate centre forward -

For checking retrusion.


The following movements can be executed by means of the joint locking device:

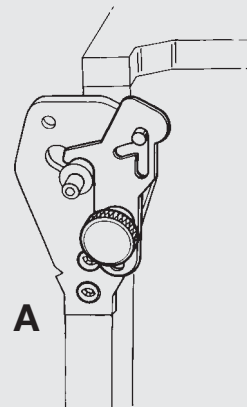

A

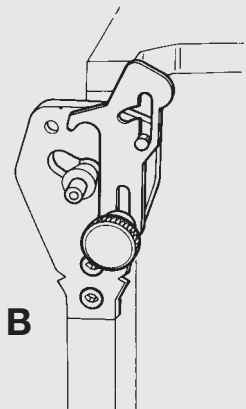


B

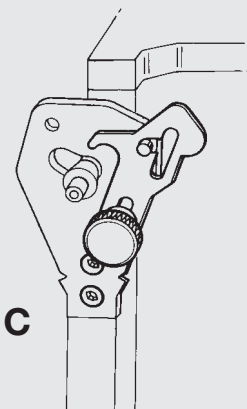

C

Accessories

- 1 Adapter for:
- setup calottes
- mounting table
- setup key
- 2 Setup calotte
- 3 Mounting table
- 4 Setup key with sliding plate and symphysis indicator
- 5 Pin support
- 6 Spacer, short
- 7 Spacer, long
- 8 Mounting plates (2 pcs)
- 9 Incisal indicator
- 10 Incisal pin, straight
- 11 Incisal plate 0°, 15°
- 12 Base plates (2 pcs)
- 13 Spacer set, for use with long straight, incisal pins.
- 14 Split cast system on demand

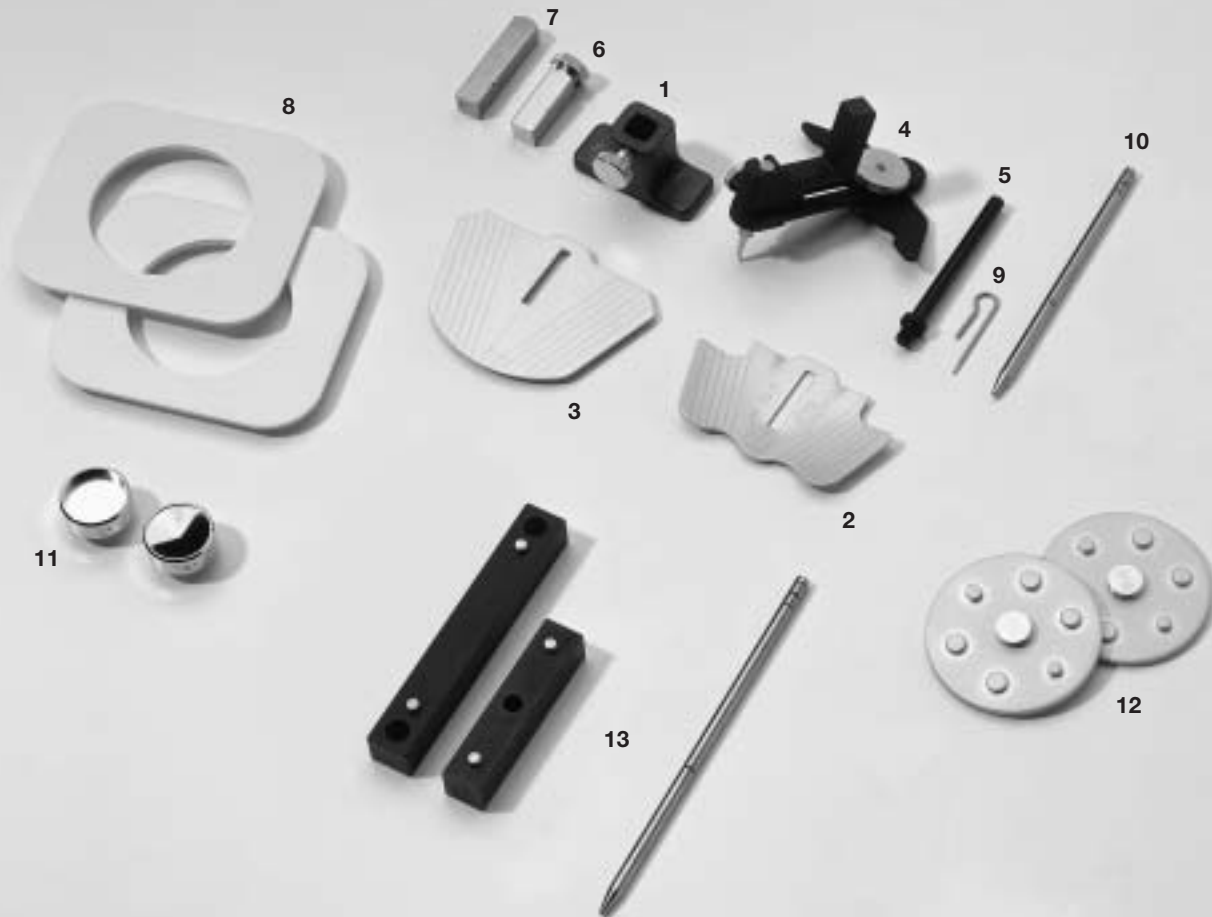


Spare Parts List

- 01 Top section
- 02 Upper mounting
- 03 Joint
- 04 Left joint casing with positioning holes for arbitrary pins
- 05 Positioning screw for joint
- 06 Set-screw for upper mounting
- 07 Lower mounting
- 08 Mounting plate
- 09 Plaster mounting aid
- 010 Bottom section
- 011 Washer
- 012 Set-screw for lower mounting
- 013 Cap
- 014 Positioning screw for mounting plate
- 015 Support pin for top section
- 016 Positioning screw for incisal pin
- 017 Right joint casing with positioning holes for arbitrary pins
- 018 Set-screws for joint casing


- 019 Tension spring
- 020 Locking device for joint
- 021 Washer
- 022 Positioning screw for joint locking device
- 023 Incisal pin
- 024 Incisal positioning pin
- 025 Securing ring
- 026 Incisal plate
- 027 Positioning screw for incisal plate

In case of defect parts, or missing parts please order according to the diagram and the spare parts list, and state the number of the part.

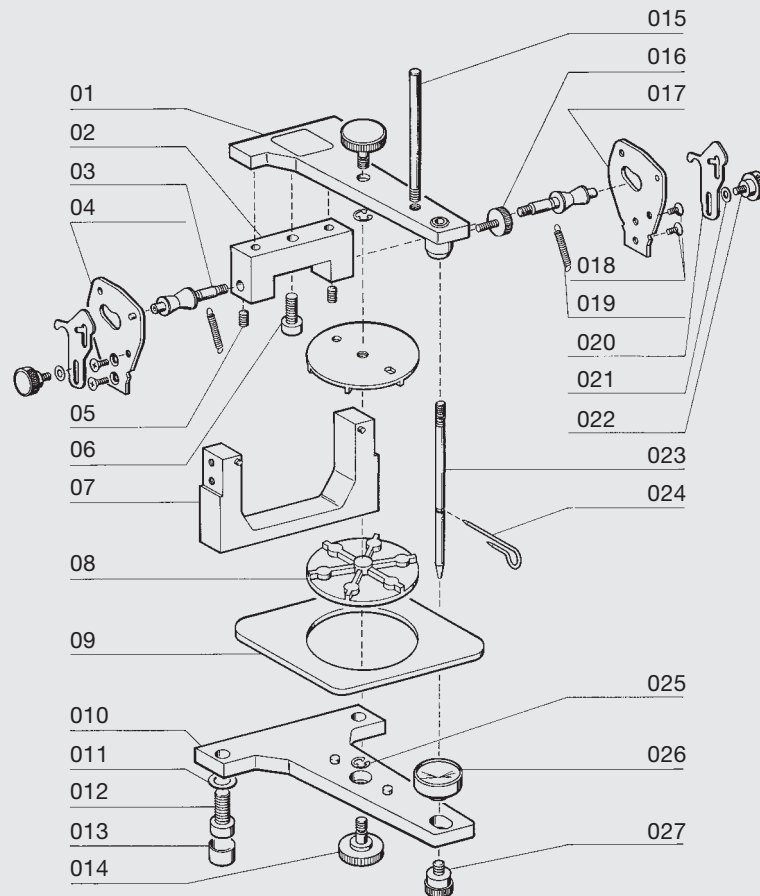

Accessories- Spare Parts List

- 028 Positioning screw for adapter
- 029 Adapter
- 030 Symphysis indicator with positioning screw
- 031 Positioning screw for support plate
- 032 Mounting key
- 033 Plate for mounting key
- 034 Counter nut for support plate
- 035 Setup calotte
- 036 Positioning screw for calotte and mounting table
- 037 Mounting table
- 038 Distance guage for adapter

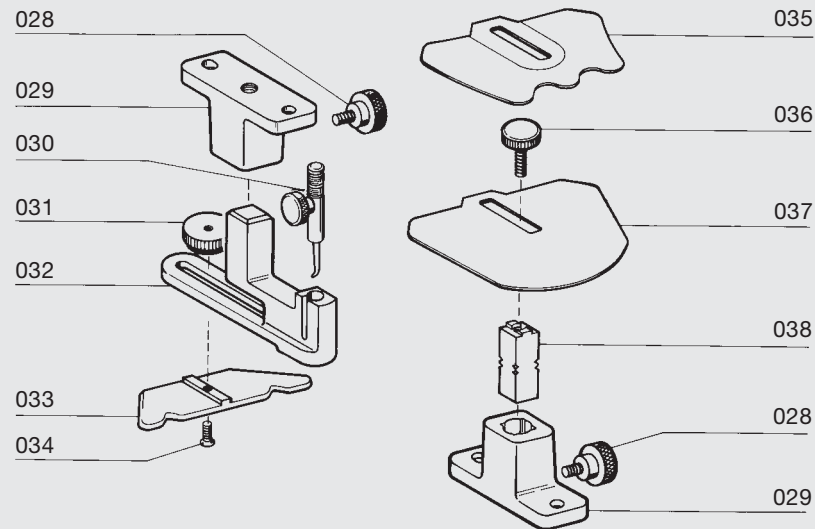



Le système Contact

■ La réalisation d'une prothèse fonctionnelle suppose des mouvements d'ouverture et de fermeture dans l'articulation analogues à ceux du patient. Selon la nature de la prothèse à concevoir, les articulateurs à valeur moyenne à caractéristiques spécifiques satisfont les exigences requises.

■ L'articulateur de Heraeus Kulzer est conforme à ces exigences. Le système Contact comprend des plaques prévues pour l'enregistrement intra-buccal.

Elles s'adaptent aux données anatomiques et physiologiques pour offrir les conditions optimales d'enregistrement, de reproduction et de transmission de la fonction de mastication.

■ Les nombreux accessoires complètent le système Contact de la société Heraeus Kulzer.

■ Des évidements existent aux extrémités de l'axe charnière, permettant de fixer un arc facial.

■ Le Système Split Cast est en option.

Contact - Un articulateur aux caractéristiques spécifiques

Articulateur à valeur moyenne

Notre articulateur à valeur moyenne Contact présente les caractéristiques suivantes:

La pente condylienne est de 30° par rapport au plan d'occlusion. La distance entre les charnières de l'articulateur et la pointe incisale est de 105 mm et correspond au triangle de Bonwill. L'angle de la table incisale est de 15°. Une table incisale à 0° est également proposée en option. La hauteur de travail pour le montage des modèles est de 100 mm.

Les charnières condyliennes de l'articulateur sont munies de deux cônes et sont conformes à la théorie condylienne du Pr. Gerber. Le cône interne à angle de 17° et le cône externe à angle de 12° permettent l'exécution des mouvements de Bennett.

Position A

- Dispositif d'arrêt en bas -
Pour le montage des modèles et tout les mouvements d'ouverture et de fermeture exécutés à partir de la position centrale (contrôle d'occlusion).

Le repère gravé sur la pointe incisale sert à déterminer le plan d'occlusion central.




Position B

- Dispositif d'arrêt en haut -
Pour la reproduction des mouvements de propulsion et de diduction.

Position C

- Dispositif d'arrêt au milieu à l'avant -
Pour le contrôle des mouvements de rétrusion.

Les mouvements suivant peuvent être effectués grâce aux différentes butées situées au niveau des charnières:

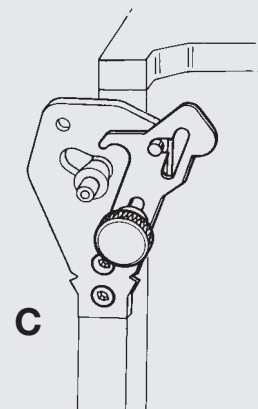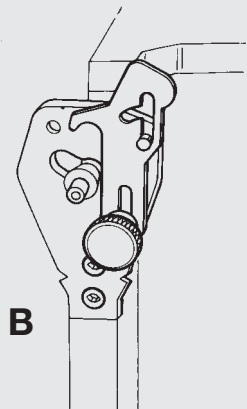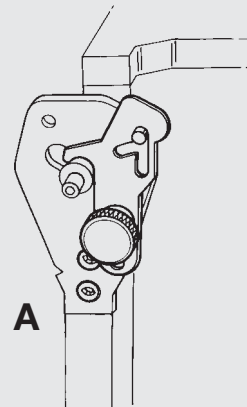

Accessoires

- 1 Adaptateur pour
 - la calotte de montage
 - la table de montage
 - la clé de positionnement
- 2 Calotte de montage
- 3 Table de montage
- 4 Clé de positionnement avec une pointe de symphyse et un plateau réglable
- 5 Butée
- 6 Support, court
- 7 Support, long
- 8 Plateaux auxiliaires de mise en articulateur (2 pièces)
- 9 Indicateur incisal
- 10 Pointe incisale, droite
- 11 Tables incisales 0°, 15°
- 12 Plaques de support (2 pièces)
- 13 Accessoire pour l'augmentation de la hauteur de travail avec une pointe incisale droite, grand format
- 14 Système Split Cast sur demande




Liste des pièces

- 01 Pièce supérieure de l'articulateur
- 02 Pièce supérieure du cadre
- 03 Charnière
- 04 Support de charnière gauche avec alésage
- 05 Vis d'arrêt pour charnière
- 06 Vis de fixation pièce supérieure du cadre
- 07 Pièce inférieure du cadre
- 08 Plaque du socle
- 09 Plaque auxiliaire de mise en articulateur
- 010 Partie inférieure de l'articulateur
- 011 Rondelle
- 012 Vis de fixation pièce inférieure du cadre
- 013 Cache-socle
- 014 Vis de blocage pour plaque du socle
- 015 Butée pour partie supérieure de l'articulateur


- 016 Vis de blocage pour cheville incisale
- 017 Support de charnière droit avec alésage
- 018 Vis de fixation pour support de charnière
- 019 Ressort de traction
- 020 Dispositif d'arrêt de la charnière
- 021 Rondelle
- 022 Vis de blocage pour dispositif d'arrêt de la charnière
- 023 Cheville incisale
- 024 Indicateur incisal
- 025 Circlip
- 026 Table incisale
- 027 Vis de blocage pour table incisale

En cas de défectuosité ou de perte de pièces, veuillez svp les commander en référence à la liste décrite sans oublier le numéro correspondant.

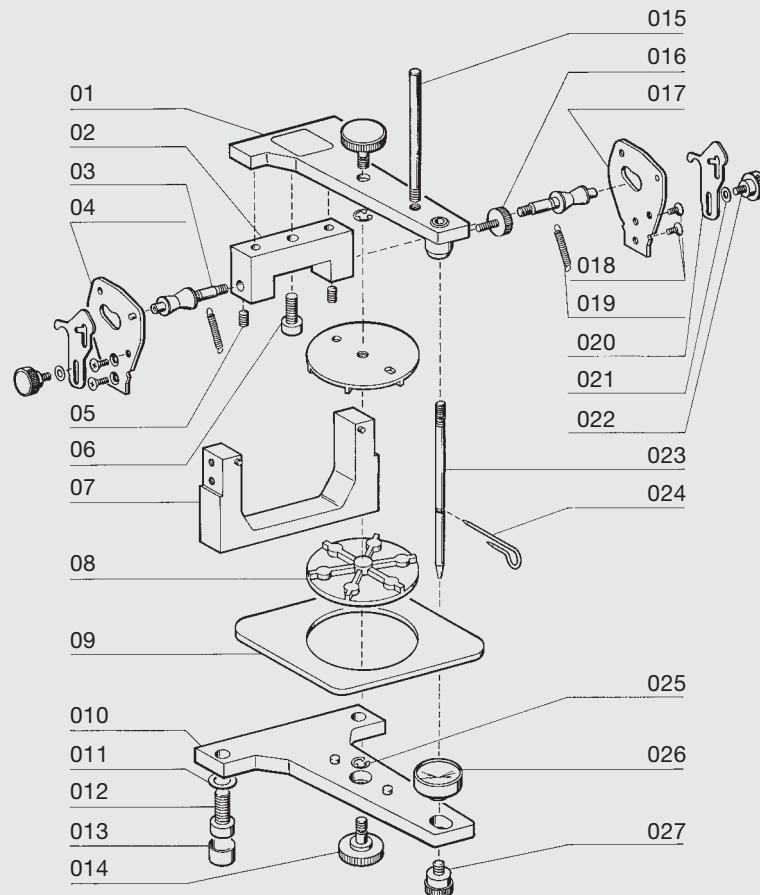

Accessoires- Liste des pièces

- 028 Vis de blocage pour adaptateur
- 029 Adaptateur
- 030 Indicateur de symphyse avec vis de blocage
- 031 Vis de blocage pour plaque d'assise
- 032 Clé de réglage
- 033 Plaque d'assise pour clé de réglage
- 034 Contre-vis pour plaque d'assise
- 035 Calotte de montage
- 036 Vis de blocage pour calotte et table de montage
- 037 Table de montage
- 038 Support pour adaptateur

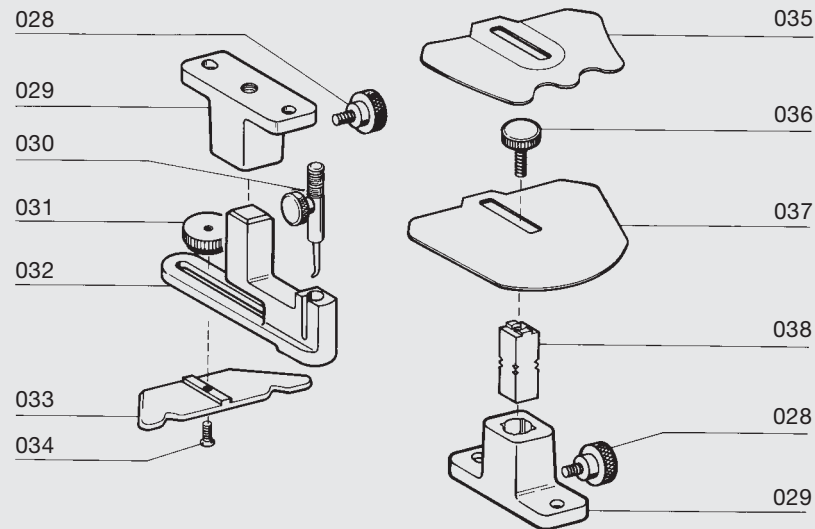



Il sistema Contact

■ Condizione indispensabile per la realizzazione di una protesi dentaria sotto l'aspetto funzionale è la riproduzione dei movimenti del paziente nell'articolatore. A seconda del tipo di protesi che si vuole realizzare può essere sufficiente un articolatore a valore medio con particolari caratteristiche qualitative.

■ L'articolatore Heraeus Kulzer soddisfa queste esigenze. Del sistema Contact fanno parte gli archi schiacciati di registrazione con perno intraorale.

Essi si basano sulle condizioni anatomiche e fisiologiche e garantiscono in modo perfetto le condizioni per una registrazione riproducibile e trasferibile della corrispondente funzione dell'organo masticatorio naturale.

■ Numerosi accessori completano il sistema dell'articolatore Heraeus Kulzer Contact.

■ Per la registrazione di tutti gli archi facciali arbitrari, i perni allegati all'articolatori vengono fissati nel foro previsto al supporto dell'articolazione.

■ Sistema Split cast a richiesta.

Contact - Articolatore a valore medio

Articolatore a valore medio

Il nostro articolatore a valore medio Contact ha le seguenti caratteristiche:

30° gradi di inclinazione del tragitto condilare rispetto al piano occlusale. La distanza fra spina incisale e lunghezza dell'articolazione dell'articolatore è di 105 mm, corrispondente al triangolo di Bonwill. L'inclinazione del piano di guida incisale è di 15°. Se necessario è disponibile un piano di guida incisale con inclinazione di 0°, come accessorio. L'altezza per inserire l'articolazione è di 100 mm.

Le articolazioni condilari sono a doppio cono, secondo la tecnica condilare del Prof. Gerber. Il cono interno con 17° e il cono esterno con 12° consentono il movimento di Bennett.

Posizione A

- bloccaggio in basso -
Montaggio del modello e movimenti a cerniera di apertura e chiusura (controllo in centrica).

Per determinare il piano occlusale centrale sulla spina incisale c'è una demarcazione zero.


Posizione B

- bloccaggio in alto -
Riproduzione dei movimenti condilari di lateralità destra e sinistra (protrusione e laterotrusione).


Posizione C

- bloccaggio in mezzo, avanti -
Controllo del movimento di retrusione (retrusiva).


Il meccanismo di bloccaggio dell'articolazione consente l'esecuzione dei seguenti movimenti:

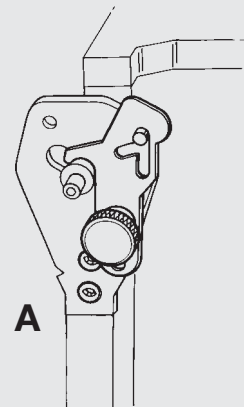

A

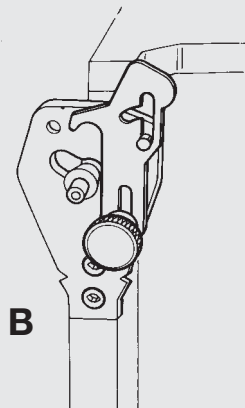

B

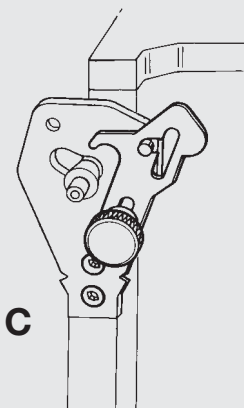

C

Accessori

- 1 Adattatore per
- calotta di montaggio
- piastra di montaggio
- chiave di montaggio
- 2 Calotta di montaggio
- 3 Piastra di montaggio
- 4 Chiave di montaggio con piastra scorrevole e stilo indicatore della sinfisi
- 5 Spina di supporto
- 6 Distanziatore corto
- 7 Distanziatore lungo
- 8 Piattelli per gessatura (2 pezzi)
- 9 Asta incisale
- 10 Asta incisale dritta
- 11 Asta incisale 0°, 15°
- 12 Piastre portamodellei
- 13 Accessorio per aumentare l'altezza con asta incisale dritta grande.
- 14 Sistema Split Cast a richiesta




Elenco dei pezzi

- 01 pezzo superiore dell'articolatore
- 02 parte intelaiature superiore
- 03 articolazione
- 04 supporto articolazione sinistro con foro per perni arbitrari
- 05 articolazione vite di supporto
- 06 vite di fissaggio del pezzo superiore dell'intelaiatura
- 07 parte intelaiatura inferiore
- 08 piastre portamodelli
- 09 piastra ausiliaria per gesso
- 010 pezzo inferiore dell'articolatore
- 011 rondella elastica
- 012 vite di fissaggio del pezzo inferiore dell'intelaiatura
- 013 cappuccio del piedino
- 014 vite di regolazione per piastra dello zoccolo
- 015 perno di supporto per parte superiore articolatore


- 016 vite di regolazione per perno incisorio
- 017 supporto articolazione destro con foro per perni arbitrari
- 018 vite di fissaggio nel supporto dell'articolazione
- 019 molla di trazione
- 020 arresto dell'articolazione
- 021 rondella elastica
- 022 vite di regolazione per arresto articolazione
- 023 perno incisorio
- 024 indicatore d'incisione
- 025 anello di fissaggio
- 026 piatto incisorio
- 027 vite di regolazione per piatto incisorio

In caso di guasto o perdita di singoli pezzi dell'articolatore, ordinarli per favore sulla base dell'elenco illustrato, indicando il relativo numero d'ordinazione.

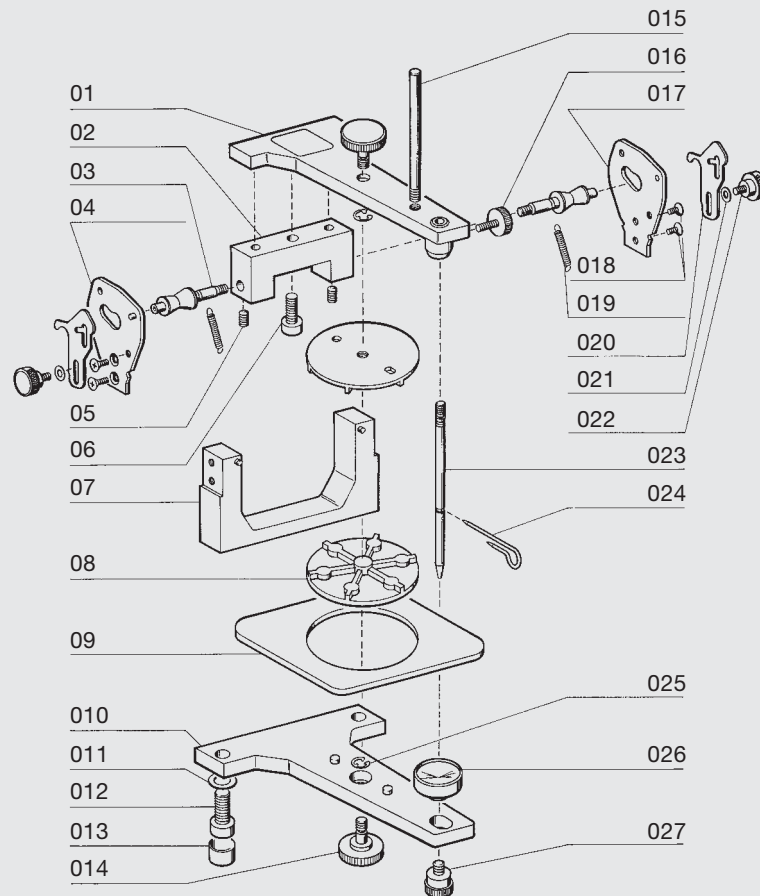


Accessori- Elenco dei pezzi

- 028 vite di regolazione per adattatore
- 029 adattatore
- 030 visualizzatore di sinfisi con vite di regolazione
- 031 vite di regolazione per piastra di appoggio
- 032 chiave di allestimento
- 033 piastra di appoggio per chiave di allestimento
- 034 controvite per piastra di appoggio
- 035 calotta per messa in opera
- 036 vite di regolazione per calotta e tavola di messa in opera
- 037 tavola di messa in opera
- 038 distanziatore per adattatore

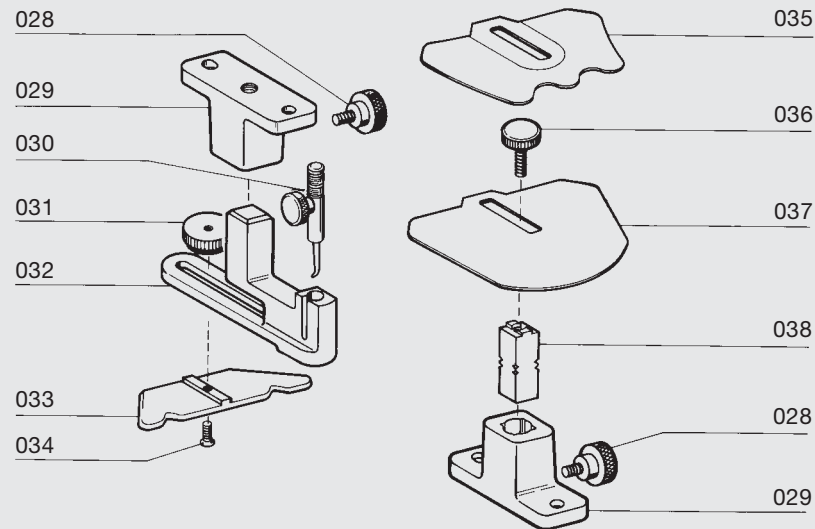









Partnership-First.

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

D-63540 Hanau

Tel. +49 61 81 35-4546

Fax +49 61 81 35-4484